

Welch Allyn ABPM 6100

Een verfijnde bloeddrukmonitor met eenvoudige éénknopsbediening

De Welch Allyn ABPM 6100 is een gebruikersvriendelijke 24-uurs bloeddrukmeter die:

- “Witte jassen” hypertensie kan identificeren
- De medicinale behandeling kan afstemmen op de individuele behoeften van een patiënt
- Nauwkeurige slaapwaarden kan waarnemen

Het toestel wordt geleverd met effectieve software die het eenvoudig maakt bloeddrukwaarden af te lezen en potentiële problemen te diagnosticeren. Het eindresultaat—de Welch Allyn ABPM 6100 verbetert de beheersing van de bloeddruk voor uw patiënt.



Welch Allyn ABPM 6100S

- De eenvoudige éénknopsbediening verbetert de therapietrouw bij patiënten die lijden aan hypertensie
- Lichtgewicht, klein en zo stil dat patiënten niet eens in de gaten hebben dat hij er is
- Effectieve op Windows® gebaseerde software – intuïtief, gebruikersvriendelijk
- De oscillometrische technologie maakt snelle installatie mogelijk, is comfortabel voor de patiënt en biedt ongeëvenaarde nauwkeurigheid
- De inhoud van het rapport afstemmen om aan uw praktijkbehoeften te voldoen
- 100% latexvrije manchetten om het risico op allergische reacties te verkleinen
- Voldoet aan of overtreft de laatste AAMI, EHS en BHS-normen
- 2 jaar garantie
- Inclusief de Welch Allyn CardioPerfect™-Workstationsoftware



Welch Allyn CardioPerfect™-Workstationsoftware


Het Welch Allyn ABPM 6100S systeem is een onderdeel van de Welch Allyn's CardioPerfect™-Workstationsoftware. Deze software is een elektronische database voor diagnostische bestanden die zorgt voor papierloze efficiëntie en connectiviteit. De Workstationsoftware omvat ook andere diagnostische modules van Welch Allyn, waaronder rust- en inspanning-ECG, holter ECG en spirometrie. Welch Allyn biedt u zo toegang tot verschillende diagnostische tests voor iedere patiënt.

- Met één druk op de knop eerdere bestanden oproepen – nooit meer door stapels papier zoeken naar de juiste informatie
- Eenvoudige evaluatie en bewerking van diagnostische tests op het scherm met vooraf bepaalde verklaringen
- De database slaat honderdduizenden testrapporten op (opslagruimte tot 2 GB).
- Raadpleeg informatie vanuit examenruimtes of uw kantoor via een netwerk
- Fax of maak PDF-bestanden (fax of PDF-software niet bijgeleverd)
- Export- of telemedicine-mogelijkheden voor e-mailconsulten
- Integratie met vele andere patiëntinformatiesystemen (bv. facturering, status)
- De software en de losse software onderdelen zijn compatibel met HIPAA
- Administratiefuncties—wachtwoordbeveiliging om de toegang en verantwoordelijkheden van gebruikers te beheersen


WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™


Welch Allyn ABPM 6100 Specificaties

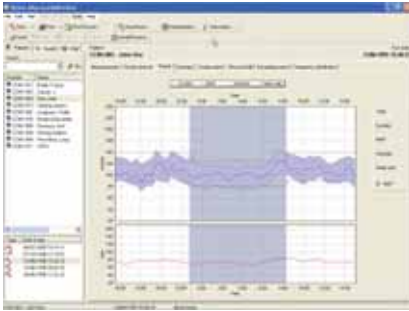

Trend

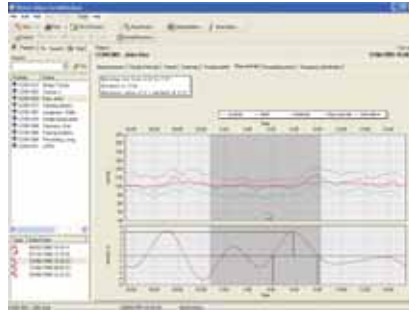

Stijging en daling

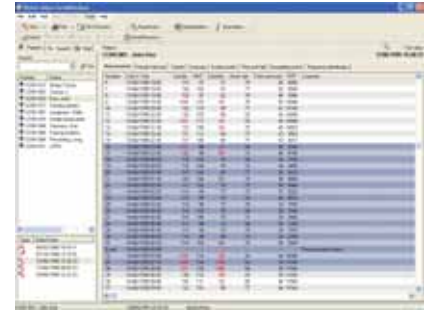

Metingen

Technische gegevens

ALGEMENE SPECIFICATIES

Batterijen: Twee van 1,5 V AA
 Afmetingen: 124 mm x 70 mm x 33 mm
 Gewicht: 270 g inclusief batterijen
 Techniek: Oscillometrische met stapsgewijze deflatie

GEHEUGEN

Alkaline batterijen: Tot 250 metingen
 Oplaadbare batterijen: Tot 110 metingen

BEDIENINGSGRENZEN

Systolische bloeddruk: 60 tot 250 mmHg
 Diastolische bloeddruk: 25 tot 250 mmHg
 Maximale inflatie: 270 mmHg
 Hartslag: 40 tot 200 spm
 Nauwkeurigheid: ± 3 mmHg of 2% van de meting
 Kalibratie: Minimaal eens per jaar

MINIMALE COMPUTEREISEN (AANGERADEN)

Processor: Pentium® III (Pentium® IV of hoger)
 RAM: 256 MB (512 MB of hoger)
 Monitorresolutie: 1024 x 768 reële kleur
 Bedieningssytemen: Windows® 2000 of XP
 CD-ROM: Vereist voor installatie
 Printers: Aansluitbaar op inkjet- en laserprinters.
 Laserprinters moeten minimaal 2 MB geheugen hebben
 Harddisk: 2 GB (4 GB of meer)

Bestelinformatie

MEETSYSTEMEN

ABPM-6100S draagbaar bloeddruksysteem met recorder, speciale draagtas met schouderband en riem om het middel, extra volwassenenmanchet, 4 AA alkaline batterijen, manchetsteunen, PC interfacekabel, gebruikershandleiding op CD en Welch Allyn CardioPerfect™ Workstationsoftware.

ABPM-6100 draagbare bloeddrukrecorder, speciale draagtas met schouderband en riem om het middel, extra volwassenenmanchet, 4 AA alkaline batterijen, manchetsteunen, PC-interfacekabel en gebruikershandleiding op CD.

ABPM 6100 BIJBEHORENDE MANCHETTEN

- 6100-10 Kindermanchet (160-218 mm)
- 6100-11 Jong volwassenen-manchet (211-266 mm)
- 6100-12 Volwassenenmanchet (254-343 mm)
- 6100-13 Extra volwassenenmanchet (270-420 mm)
- 6100-14 Extra Grote volwassenenmanchet (343-482 mm)

OVERIGE ABPM 6100 ACCESSOIRES

- 6100-21 Op maat gemaakte draagtas
- 6100-22 Schouderband (zwart)
- 6100-23 Riem voor om het middel (zwart)
- 6100-24 PC-interfacekabel
- 6100-25 "Y" Kalibratie Check Fitting
- ABP-SW ABPM-Workstationsoftware CD
- 5100-42E Patiëntendagboeken (Set van 50)
- 5100-44 Pads, manchetsteunen (Set van 50)

